



シリコンゴムでセンサーと本体ボディを一体化。  
従来のバネ式とは異なるソフトな使い心地と耐久性を実現しました。

# OxyTrue® SC

## SoftCap® Finger Oximeter

オキシトウルー

ソフトキャップ

### SoftCap®

シリコンゴムボディ採用

シリコンゴム（ラテックスフリー）で安心・ソフトな感触のフィンガーセンサーが本体と一体化。新技術“Thermo-Q”で高いノイズ除去性能を発揮し、低還流時でも良質な情報を提供します。

SAPPHIRE®  
TECHNOLOGY

Q-Chip®

Rubber  
boot®

OxyTrue SCは、人間工学的に適したフォームによって構成された子供・大人の指用パルスオキシメーター。シリコンゴムボディを採用し、ソフトな使い心地と落下・衝撃に強い耐久性を実現しました。



Made in Germany

ドイツ製

Worldwide patents pending  
国際特許出願中

衝撃・落下に強い  
シリコンゴム  
ボディ

オートパワーオフ  
15秒後  
自動電源OFF

ワンボタンで  
カンタン  
操作

カラーグラフィック  
有機LED  
ディスプレイ採用  
美しく見やすい画面!

»PRODUCTS that care  
for you«

KYOTO MEDICAL PLANNING

「オキシトゥルー A」を継承した6つのディスプレイパターン。


欲しい情報を瞬時にキャッチできます。




ワンボタンで  
操作ラクラク



ディスプレイパターン例  
(全6パターン)

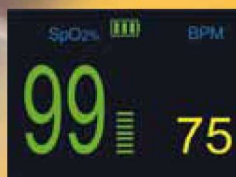

NEW! 環境光感知機能搭載

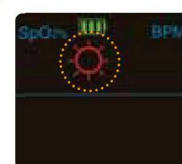

オキシトゥルー SCに太陽光が入った時、及び強い環境照明が入った場合にはマークが表示されSpO2の測定は出来ません。この場合には太陽光及び環境照明を黒いタオル等で光を遮断して測定してください。

どんな状況下でもフレキシブルに対応。

本体特徴

- ・落下/衝撃に強い“シリコンゴムボディ”
- ・人間工学に基づいたデザイン
- ・画面の明るさは6段階調節可能
- ・約58gで軽量/コンパクトボディ
- ・約15秒後にオートパワーオフ
- ・ネックストラップで持ち運び簡単
- ・バーグラフ/プレチスモグラムで、信号品質やパルス振幅の信頼度を視覚的に確認可能



ネックストラップ付き

## OxyTrue® SC SoftCap® Finger Oximeter

### 技術仕様

|         |                                              |                               |                  |                    |                          |                                |   |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| 測 定 範 囲 | SpO <sub>2</sub>                             | 0-100%                        | 注 文 番 号          | OxyTrue®SC         | カラー：グレー                  | 1020112004-GRY                 |   |
|         | 脈拍数                                          | 20-300bpm                     |                  | そ の 他              | 外形寸法                     | 65mm(幅) × 50mm(奥行き) × 34mm(高さ) |   |
| 測 定 精 度 | SpO <sub>2</sub>                             | ±2%(70-100%)                  | 構 成 内 容<br>(セット) |                    | 重量                       | 58g(電池含む)                      |   |
|         | 脈拍数                                          | ±1digit(≦100bpm)、±1%(>100bpm) |                  | 使用電池               | アルカリ乾電池 単 4 形 1.5V × 2 本 |                                |   |
| 表 示     | ・有機 LED カラーグラフィックディスプレイ(広角視覚)                |                               | 電池寿命             | 連続使用：約 24 時間       |                          |                                |   |
|         | ・SpO <sub>2</sub> (酸素飽和度)、脈拍数、プレチスモグラム、バーグラフ |                               |                  | 本体                 | OxyTrue®SC (カラー：グレー)     |                                | 1 |
|         | ・インジケータ：信号品質、パルス振幅、電池状態                      |                               |                  | ネックストラップ           |                          | 1                              |   |
| 使用温湿度範囲 | - 20 ～ 50℃、15 ～ 95% (結露しないこと)                |                               | 付属品              | アルカリ乾電池 単 4 形 1.5V |                          |                                | 2 |
| 保管温湿度範囲 | - 30 ～ 70℃、10 ～ 95% (結露しないこと)                |                               |                  | 使用説明書              |                          |                                | 1 |
| 環 境 条 件 | 600 ～ 1300hPa 水の侵入に対する保護の程度：IPX2             |                               | 標 準 価 格          | 53,900 円(税別)       |                          |                                |   |

\*販売名: オキシトゥルーSC、類別名称: 機械器具 (21) 内臓機能検査用器具、JMDNコード: 17148010、JANコード: 4582235340039、パルスオキシメータ、「管理」「特管」、クラスII、認証番号: 221AGBZX00218000

### 【お問い合わせ先】

<販売業者>

KYOTO MEDICAL PLANNING

株式会社 京都医療設計ジャパンメディカル事業部

〒607-8035 京都市山科区四ノ宮神田町4番地 古橋山科ビル

TEL.(075)582-9580 FAX.(075)582-9581

http://www.kyoto-mp.co.jp/

製造販売業者



株式会社 アイビジョン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-15-13

お茶の水ウイングビル7F

Tel:03-5615-8612 Fax:03-5615-8613

HomePage: http://www.aivision.co.jp/

- 本製品は医療機器ですので、医師の指導に従ってご使用ください。
- 添付文書や取扱説明書に従って正しくご使用ください。
- 改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログは2011年2月現在のものです。

Made in Germany